


ELGYDIUM CLINIC


GOTOWE ROZWIĄZANIA MEDYCZNE

Szczoteczki międzyzębowe

WYBIERZ ODPOWIEDNI ROZMIAR

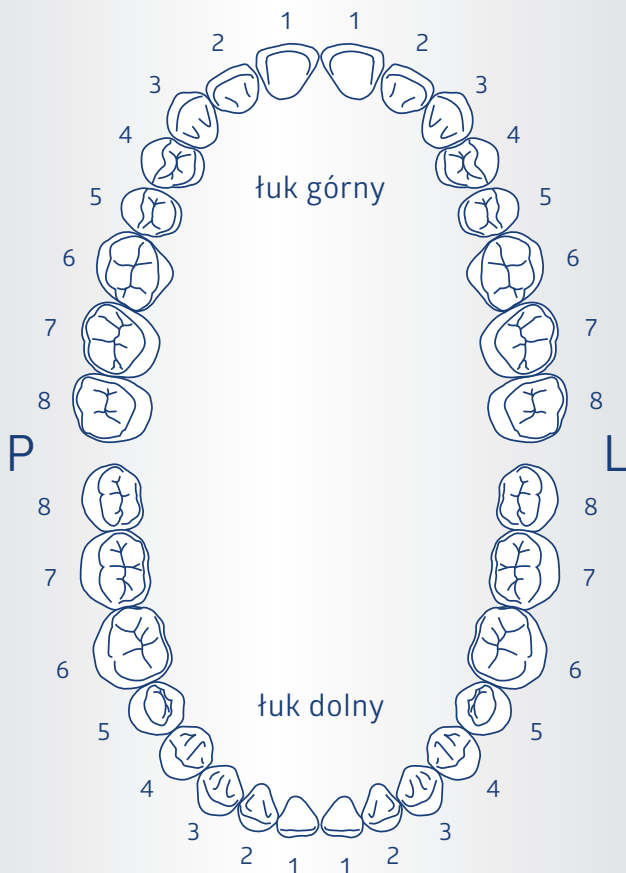

Ø PRZESTRZENI
MIĘDZYZĘBOWEJ

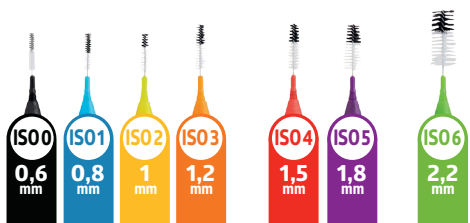

Pierre Fabre
ORAL CARE

Szczoteczki dostępne wyłącznie
w aptekach i gabinetach stomatologicznych.

Szczoteczki międzyzębowe

UŻYWANIE SZCZOTECZEK MIĘDZYZĘBOWYCH



Dlaczego warto je używać?

Ponieważ samo szczotkowanie:

- > nie usunie całej płytki nazębnej, a jest ona głównym czynnikiem powstawania próchnicy i chorób dziąseł
- > nie usunie resztek jedzenia z trudno dostępnych miejsc



przednie odcinki



W jakich przypadkach należy stosować szczoteczki międzyzębowe?

- > codziennie, do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych
- > do czyszczenia odsłoniętych korzeni zęba, implantów, aparatów ortodontycznych



tylne odcinki



Instrukcja użycia

- 1 Wybierz **odpowiedni dla siebie rozmiar lub rozmiary szczoteczek** (twoje przestrzenie międzyzębowe rzadko są takiej samej wielkości)
- 2 **Zwilż szczoteczkę** w płynie lub żelu antyseptycznym (jeśli tak zaleci twój dentysta)
- 3 **Delikatnie** wprowadź szczoteczkę do przestrzeni międzyzębowej, **poruszaj nią do tyłu i do przodu**
- 4 Po każdym użyciu **dokładnie przepłucz szczoteczkę** pod bieżącą wodą. Wymień szczoteczkę na nową, jak tylko zauważysz jej zużycie

SZCZOTECZKI MIĘDZYZĘBOWE

Wybierz szczoteczkę odpowiednią dla Ciebie



Mono Compact

Wygodny uchwyt



Trio Compact

Kompaktowy uchwyt, 3 w 1



Flex

Długi uchwyt



PFM/5/2019